


JY-WF121

高畫質HD冷熱敷粉刺機(家庭用)

使用說明書 Instruction Manual

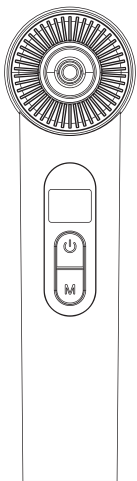

廢電池、紙類、塑膠類請回收


- 在使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，並保存好以備日後參考
- 本手冊經仔細檢視及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當 呈堂之依據，其將於新版予以修正。
- 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知

重要安全事項須知

- 1.本商品有提拉作用，有受傷、傷疤的皮膚不建議使用。
- 2.使用時，請勿用力按壓於皮膚表面。
- 3.使用本產品後，皮膚會出現些許泛紅狀況，屬正常現象。停用30分鐘後會漸漸消失。
- 4.使用本產品結束後請做好保濕工作。
- 5.請勿在使用本商品前、後使用磨砂膏或其他吸角質商品。
- 6.請使用乾燥棉花棒進行吸頭的清理工作。
- 7.請勿用水清洗機器。
- 8.以下情況，不建議使用本商品，以免發生意外
 - (1) 正接受醫師治療和身體感覺異常者
 - (2) 惡性腫瘤者
 - (3) 孕婦、產婦、兒童
 - (4) 感染病患者
 - (5) 有皮膚知覺障礙、皮膚異常者
 - (6) 急性病患者
- 9.在外殼被損壞或設備的機械或電子故障的情狀下，請暫停使用本產品。
- 10.請勿將本商品放置於強光照射的位置，請放置於乾燥通風處。

本產品僅適用於家庭或個人使用，禁止用作商業用途。

部件名稱

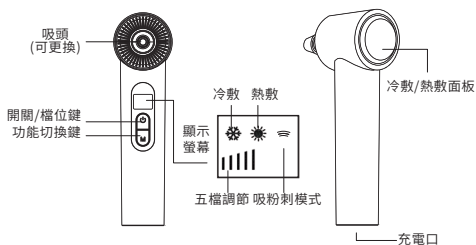

- 注: 1.產品外觀各有差異，上圖僅供參考，具體請以實物為準。
 注: 2.產品外觀若有技術改進，會編進新版說明書中，恕不另行通知。

吸頭介紹

本商品配備6個吸頭，每個吸頭吸力不同，吸頭請從小到大更換使用，逐步適應吸力大小吸頭越大，吸力越強，吸頭越小，吸力較弱。

●迷你圓孔吸頭

吸力小，用於粉刺較小、敏感皮膚、鼻溝處粉刺等。

●小圓吸頭

吸力小，適合皮膚較嫩、較薄、皮膚承受力較小者使用。

●中小圓吸頭

吸力中等，適合油脂分泌一般者使用。



●中國吸頭

吸力中等，適合粉刺油脂分泌過多者使用。

●中大圓吸頭

吸力大，適合皮膚承受力強或黑頭較多者，使用時需要往後慢慢在皮膚上移動。

●大圓吸頭

吸力強，用於吸粉刺V臉，使用需要往後慢慢在皮膚上移動，請勿在一個部位吸超過2秒以上，V臉時須從下往上提手法，從下巴往上慢慢移動。

操作說明

●手機APP可視模式

- 1.從應用商店或者掃描QRCODE下載App: Coolereer
- 2.長按主機“開關/檔位鍵按鈕”按鈕3秒將商品開啟(顯示螢幕綠燈亮燈)。
- 3.開啟手機WiFi設定，搜尋Wi-Fi名為coolereer-XXXX 密碼為12345678 將商品進行連結
- 4.完成連結後開啟手機程式進行使用

(*當吸頭內部的燈亮時，表示與手機連線成功，若APP中沒有畫面，請確認WiFi是否連線成功)


●按鈕說明



開關/檔位鍵按鈕

開機:長按按鈕3秒可將商品開啟

檔位:開機後，短按即可開啟吸粉刺功能 吸力由每次短按而漸增，共5個檔位，在第5個檔位後再次短按為關閉吸黑頭功能。

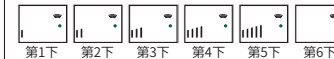

依次順序:吸粉刺模式-冷敷模式-熱敷模式

吸粉刺模式

冷敷模式

冷敷溫度為15度，3分鐘後會自動斷電。(需20分鐘散熱，散熱後便可再次使用，散熱時面板會微微發熱)

熱敷模式

熱敷溫度為42度，可持續使用



功能切換鍵

- 吸粉刺時與粉刺導出液配合使用效果更佳。
- 將粉刺探頭調整到合適的位置，並在需要清理的皮膚區域緩緩移動探頭。不要長時間吮吸同一個部位。(在吸頭離開皮膚前，請將吸頭向側面打開，釋放負壓空氣，即可輕鬆取出)。

使用步驟

<p>1.熱敷臉部</p> <p>用熱毛巾或蒸臉機熱敷 3-5分鐘左右讓毛孔打開</p>	<p>2.塗上導出液</p> <p>把導出液滴到化妝棉上 敷與3-5分鐘</p>	<p>3.選擇檔位</p> <p>開啟可視模式，使用WiFi連接手機後，調節好適合自己皮膚的檔位</p>
<p>4.吸附臉部</p> <p>手機可以看到臉上的粉刺位置 在臉部有粉刺的部位 緩慢移動吸頭 (每次使用1-2分鐘即可)</p>	<p>5.沖洗臉部</p> <p>吸出粉刺後 用清水清洗臉部</p>	<p>6.護理臉部</p> <p>塗上收斂水使毛孔收縮毛孔 或補水面膜</p>

限用物質含有情況標示

設備名稱:高畫質HD冷熱敷粉刺機		型號:JY-WF121				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機殼	○	○	○	○	○	○
吸嘴	○	○	○	○	○	○
按鈕	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
USB線	○	○	○	○	○	○

備考1.“>0.1wt%”及“>0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3.“—”係指該項限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

產品規格

型號	JY-WF121
名稱	高畫質HD冷熱敷粉刺機
額定電壓	DC 5V 1A
消耗功率	5W
電池容量	1000mah
充電時間	2小時
使用時間	單獨真空240分鐘
USB電線長	60cm
材質	ABS
商品淨重	0.198 kg
商品原產地	中國